

Science **made** smarter

Callisto™

Lo clínico
hecho portátil



Audiometría
y adaptación
de audífonos en un
portátil, todo en un
sistema.




Interacoustics

Audiómetro
~~~~~

Timpanometría

PEA

OAE

Adaptación de Audífonos  
~~~~~

Diagnóstico del equilibrio

Establezca su propia combinación

de pruebas en una sola plataforma

Personalice su Callisto™, a través de los módulos incluidos, para conseguir la combinación perfecta de audiometría, REM, HIT con la caja TBS10 y Mapa visible del habla.

// Inspirado por los sistemas de audiometría y de oído real y analizador de audífonos, pero en tamaño reducido

AC440

Audiometría

REM440

Medidas en oído real

VSP440

Mapa visible del habla

HIT440

Comprobación de audífonos

Viot™

Videotoscopio

Volumen reducido y peso ligero (565g)



Nueva caja TBS10 para realizar los test a los audífonos.



Viot videoscopio ofrece total integración en la Suite del Callisto

Adaptación a la práctica moderna

Lleve la clínica a su cliente

Ideal para viajes y visitas a domicilio Callisto™ es compacto y ligero, pesa sólo 565 gramos (1,25 libras). Se alimenta a través de un PC USB y puede transportarse fácilmente con una bolsa de transporte opcional con ruedas. El sistema puede utilizarse en la bolsa, lo que lo hace muy práctico para los audiólogos.

Audiometría integral

Callisto™ admite audiometría de alta frecuencia enmascaramiento, la prueba TEN y QuickSIN (opcional), junto con con superposiciones de asesoramiento personalizables. También incluye herramientas auditivas como el Speech Banana, Simulador de pérdida auditiva y Audífono Maestro.

Conversaciones más claras

Mediante una sencilla configuración con transductores y un botón de respuesta del paciente, la prueba del Umbral de Contraste Audible (ACT™) es una medición objetiva e independiente de la capacidad auditiva en menos de tres minutos. Con el valor ACT™, estará en una posición aún mejor para tomar decisiones informadas sobre las características avanzadas de los audífonos y gestionar las expectativas de sus clientes.

Mediciones avanzadas en oído real

El módulo de medición de oído real dispone de mapeo visible del habla con análisis de percentiles y múltiples de voz en varios idiomas, incluidos ISTS y Live Voice. Es compatible con de ajuste abierto, pruebas de direccionalidad entre las vistas HL y SPL.


El módulo es compatible con los objetivos de prescripción NAL-NL2 y los objetivos de prescripción DSLv5 y ofrece una opción de base de acoplador para la verificación, así como binaural REM.

Pruebas eficaces de audífonos


El módulo de prueba de audífonos cubre una gama de frecuencias de 100 a 10.000 Hz e incluye secuencias de basadas en las normas IEC y ANSI. Las sesiones de prueba pueden guardarse y recuperarse para su comparación directa. La caja de pruebas TBS10 facilita la adaptación de audífonos acoplador, incluidas las mediciones RECD dentro de la caja de pruebas.



Prueba de umbral de contraste audible (ACT™)

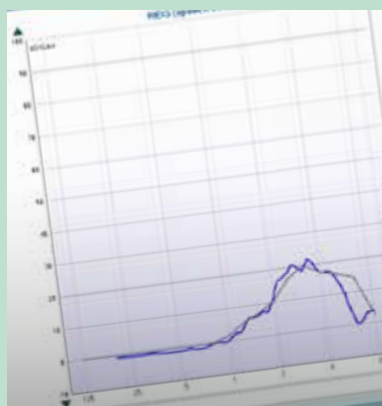

Medición en oído real (REM)

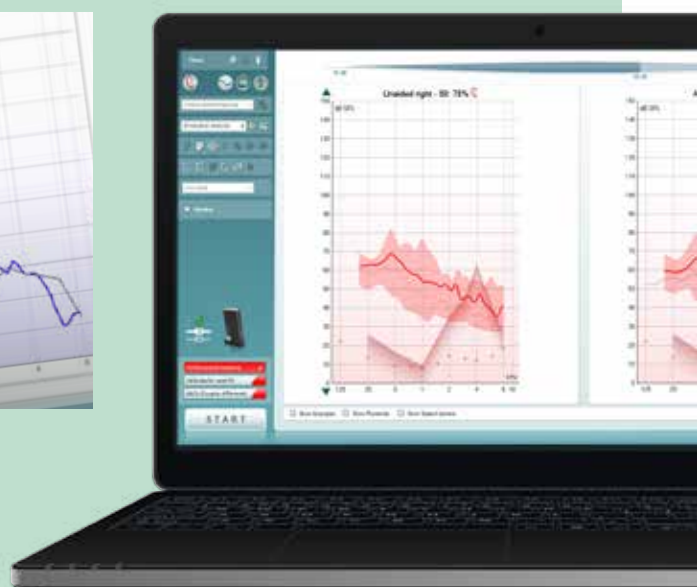

Mapeo del habla visible

Science made smarter

Interacoustics es más que soluciones de vanguardia

Nuestra misión está clara. Queremos ser líderes en audiolología y equilibrio traduciendo la complejidad en claridad:

- Desafíos convertidos en soluciones claras
- Conocimiento práctico
- Condiciones médicas invisibles hechas tangibles y tratables

Nuestra tecnología avanzada y nuestras soluciones sofisticadas facilitan las vidas de los profesionales de la salud.

Continuaremos estableciendo el estándar para todo un sector. No por el bien de la ciencia. Sino para capacitar a los profesionales para que puedan ofrecer Un tratamiento excelente para millones de pacientes en todo el mundo.

Interacoustics.com

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Dinamarca

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Vaya a la
página web
para explorar
nuestra gama
de productos
completa

Familia de Productos



Affinity Compact
Next generation
of hearing aid fitting



TBS10
Cámara anecoica



Viot™
Videotoscopio

Descripción técnica de nuestros productos

Todas las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden ser descargadas desde nuestra página web.




Interacoustics